

دليل المريض لتسريب الغلوبولين المناعي تحت الجلد باستخدام المضخة:

الخطوة 1: تجهيز معدات التسريب

جهّز جميع المعدات اللازمة:

قائمة المعدات	
غطاء	قطن طبي
علبة للأدوات الحادة	مناديل معقمة
زجاجات الغلوبولين المناعي	شريط المايكروبور
إبر التسريب تحت الجلد	سجل التسريب
إبر خضراء	مضخة
السيرنجات	



الخطوة 2: الاستعداد للتسريب

- نظّف مساحة العمل باستخدام فوطة معقمة، ثم اغسل يديك بالماء والصابون ومن ثم جففهما بمنشفة جافة.



- أخرج جميع المعدات من مغلقاتها وضعها على مكان العمل بعد تنظيفه.



- افحص كل زجاجة غلوبولين مناعي :
 - 0 تأكد من احتوائها على الجرعة الصحيحة.
 - 0 تأكد من تاريخ إنتهاء الصلاحية.
 - 0 تأكد من عدم وجود أي تلف بالزجاجة.
 - 0 تأكد من صفاء الغلوبولين المناعي.

لا تستخدم زجاجة الغلوبولين المناعي في الحالات التالية:	ما يجب عليك فعله:
• وجود كسر أو شرخ بالزجاجة. • عدم وجود الغطاء الحامي. • الزجاجة منتهية الصلاحية.	• قم بتسجيل رقم دفعة الغلوبولين المناعي في سجل التسريب الخاص بك، واذكر سبب عدم استخدامك له. • ثم قم بالتخلص منه برمييه في علبة الأدوات الحادة.
لا تستخدم زجاجة الغلوبولين المناعي في الحالات التالية:	ما يجب عليك فعله:
• الغلوبولين المناعي يبدو معكراً (غير صافياً) أو يحتوي على جسيمات.	• قم بتسجيل رقم دفعة الغلوبولين المناعي في سجل التسريب الخاص بك، واذكر سبب عدم استخدامك له. • قم بإخبار فريق المناعة. • لا تقم برمي الزجاجة، وإنما قم بإعطائها لفريق المناعة.




الخطوة 3: تجهيز الغلوبولين المناعي

- ألحق الإبرة بالسيرنج. اسحب مكيس السيرنج إلى الخارج لتملأ بالهواء. يجب أن يكون مقدار الهواء في السيرنج مماثلاً لمقدار الغلوبولين المناعي الذي ترغب بوضعه بالسيرنج.



- ضع زجاجة الغلوبولين المناعي على سطح مستوي، ثم أدخل الإبرة من خلال الغطاء المطاطي. سيؤدي ذلك إلى إدخال الهواء من السرنج إلى الزجاجة.

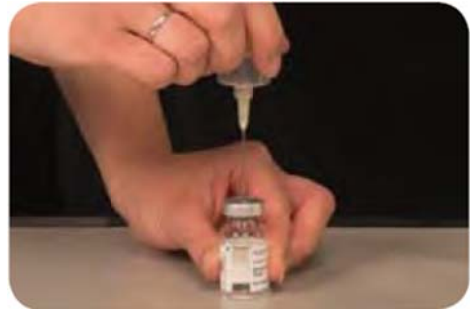

- اقلب زجاجة الغلوبولين المناعي وأدخل إبرة الحقن داخل الغطاء المطاطي، سيملاً الغلوبولين المناعي السرنج تلقائياً، ولكن قد تحتاج إلى تحريك الإبرة قليلاً.



- أخرج الإبرة والسرنج المملوء بالغلوبولين المناعي من الغطاء.
- ادفع الهواء خارجاً من السرنج بالنقر عليها أو بدفع الغلوبولين المناعي إلى الأعلى باتجاه الإبرة.
- قم بإزالة الإبرة وإلقائها في علبة الأدوات الحادة.



- قم فوراً بإرفاق السرنج بأنبوب إبرة الضخ، ثم قم بدفع غطاء السرنج. سيؤدي ذلك إلى دفع الغلوبولين المناعي إلى داخل الأنبوب وإخراج الهواء، توقف عن دفع غطاء السرنج عندما ترى الغلوبولين المناعي ظاهراً عند نهاية إبرة الضخ.



الخطوة 4: تجهيز مكان الحقن

- اختار المكان المناسب للتسريب على البطن أو الفخذ.
- يجب عليك استخدام مكان مختلف عن المكان الذي استخدمته للتسريب في المرة السابقة. سيخبرك فريق المناة الخاص بك بعدد مواقع التسريب التي ستحتاجها وعن كمية الغلوبولين المناعي التي يجب تسريبها في كل مكان.

- نَظِّفِ الجِلْدَ فِي كُلِّ مَوْقِعٍ بِاسْتِخْدَامِ مَندِيلٍ مَعْقَمٍ، وَاتْرَكْهُ لِيَجْفَ.



نصائح لاختيار مكان الحقن:

- 0 الأماكن الجديدة يجب أن تكون على بعد 5 سم على الأقل عن المكان المستعمل سابقاً.
- 0 لا تستعمل أي مكان يكون فيه الجلد مؤلماً عند اللمس أو صلباً، يحتوى على كدمات، أو فيه إمرار.
- 0 ابتعد عن الأوردة الصغيرة الظاهرة على ظهر الجلد.
- 0 ابتعد عن الندب وعلامات التمدد.

الخطوة 5: إدخال الإبرة

- باستخدام إصبعين أقرص الجلد حول مكان التسريب.



- أدخل الإبرة تحت الجلد بزاوية 90 درجة وتأكد من ثباتها بشريط لاصق.



- لتتأكد من أنك لم تدخل الإبرة بأحد الأوردة، إسحب غطاء السرنج ببطء، إذا رأيت أي دم داخل الأنبوب، أخرج الإبرة من مكان التسريب ثم من السرنج وقم بإلقائها في علبة الأدوات الحادة.

- أدخل إبرة جديدة وأنبوب جديد على السرنج المملوء بالغلوبولين المناعي ثم اضغط على غطاء السرنج لملء الأنبوب بالغلوبولين المناعي وإخراج الهواء. ضع الإبرة في مكان تسريب مختلف وتأكد مرة أخرى أنك لم تدخل بأحد الأوردة بالخطأ.

الخطوة 6: تسريب الغلوبولين المناعي

- أدخل السرنج بمضخة التسريب.



- شغل مضخة التسريب. سيكون معدل الضخ مبرمجاً بالمضخة بواسطة فريق المناعة.

الخطوة 7: الإنتهاء من الضخ والتنظيف:

- عند الإنتهاء من ضخ الغلوبولين المناعي بالكامل، انزع الشريط اللاصق وأخرج الإبرة، ثم قم بالتخلص من الإبرة، والأنبوب والسرنج في علبة الأدوات الحادة.
- قم بتغطية مكان التسريب بقطعة شاش، ضمادة أو شريط لاصق.



- نظف مضخة التسريب ومكان العمل، ثم اغسل يديك.

الخطوة 8: تسجيل معلومات التسريب

- سجل التسريب في سجل التسريب الخاص بك. يوجد ورقة لاصقة على علبة الغلوبولين المناعي يمكنك إزالتها وإلصاقها في سجل التسريب، وتحتوي على رقم الدفعة الخاص بالغلوبولين المناعي. تأكد من تعبئة جميع البيانات و أحضر السجل معك للعيادة.

